

Poziom możliwości

Klasa	Pierwsza B90	Biznes B70	Ekonom. B50	Podstaw. B30*
AutoSense OS	Premium	Advanced	Standard	Essential
Spokojne sytuacje	•	•	•	•
Mowa w hałasie	•	•	•	•
Komfort w hałasie	•	•	•	
Muzyka	•	•		
Mowa w dużym hałasie	•			
Mowa w samochodzie	•			
Komfort w pogłosie	•			
Dodatkowe programy				
Maks. liczba dodatkowych prog.	5	5	5	5
Mowa i Wiatr	•			
Komfort w pogłosie	•			
Mowa w dużym hałasie	•	•		
Mowa z 360°	•	•		
Mowa w hałasie	•	•	•	•
Spokojne sytuacje	•	•	•	•
Komfort w hałasie	•	•	•	•
Muzyka	•	•	•	•
Telefon akustyczny	•	•	•	•
Program indywidualny	•	•	•	•
Programy strumieniowe				
Maks. liczba prog. strumieniowych	4	4	4	4
Bluetooth audio + mik	•	•	•	•
Telefon Bluetooth / DECT + mik	•	•	•	•
RemoteMic / Roger	•	•	•	•
Audio jack	•	•	•	•

Funkcje	Pierwsza B90	Biznes B70	Ekonom. B50	Podstaw. B30*
UltraZoom	Premium	Advanced	Standard	Essential
SNR-Boost	•	•	•	
FlexControl	•	•	•	
FlexVolume	•	•	•	
DuoPhone	•	•	•	
SoundRecover 2	•	•	•	•
Dopasowanie do pref. użytkow.	•	•	•	•
Real Ear Sound	•	•	•	
Kanały dokładnego strojenia	20	16	12	8
WhistleBlock	•	•	•	•
NoiseBlock	•	•	•	•
WindBlock	•	•		
EchoBlock	•			
SoundRelax	•	•		
QuickSync	•	•	•	•
AOV	•	•	•	•
Tinnitus Balance	•	•	•	•
auto Aklimatyzacja	•	•	•	•

Life is on

W firmie Phonak wierzymy, że dobre słyszenie jest niezbędne, aby żyć pełnią życia. Od ponad 70 lat oferujemy pionierskie rozwiązania wspomagające słyszenie, które zmieniają życie osób z ubytkiem słuchu. Życie trwa. Life is on.

www.phonakpro.pl

Phonak Audeo™ B






Informacje o produkcie



Phonak Audeo B to kompleksowa oferta aparatów typu RIC dla ubytków słuchu od łagodnych do ciężkich. Phonak Audeo B obejmuje pięć modeli aparatów, trzy zewnętrzne słuchawki i cztery klasy zaawansowania, posiadające generator szumów do zarządzania tinnitusem. Oparte na innowacyjnej platformie technologicznej Phonak Belong, aparaty słuchowe Phonak Audeo B są idealnym rozwiązaniem dla pacjentów ceniących największe możliwości słyszenia w wytrzymałych i dyskretnych obudowach RIC.

Więcej informacji na stronie www.phonakpro.pl

Opis produktu

	 Audeo B-10 B90/B70/B50/B30	 Audeo B-312 B90/B70/B50/B30	 Audeo B-312T B90/B70/B50/B30	 Audeo B-13 B90/B70/B50/B30	 Audeo B-R B90/B70/B50	
Bateria	10	312	312	13		
Przełącznik (Program/Głośność)	•	•	•	•	•	
Regulator głośności				•		
Cewka telefoniczna			•	•		
EasyPhone	•	•	•	•	•	
Nano powłoka	•	•	•	•	•	
Współczynnik IP ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	IP68 ¹	
Wymiary	23.8 x 10.2 x 6.5 mm	26.6 x 10.8 x 6.9 mm	28.7 x 12.3 x 6.8 mm	31.6 x 14.4 x 8.4 mm	29.7 x 12.9 x 7.9 mm	
	Waga	1.0 g	1.3 g	1.5 g	2.2 g	2.4 g
Żywotność akumulatora ²	Brak przekazu audio/media				24 h	
	5 godz. przekazu audio/media				20 h	
	10 godz. przekazu audio/media				16 h	
Czas ładowania ³	od 0% do 100%				3 h	
	od 0% do 80%				1.5 h	
	30 min. dopasowania				10 min.	
Standard xReceiver (xS)						
Maks. moc wyjściowa (dB SPL)						
	Sprzęgacz 2cm ³	111	111	111	111	
	Symulator ucha	122	122	122	122	
Maks. wzmacnienie (dB)	Sprzęgacz 2cm ³	46	46	46	46	
	Symulator ucha	56	56	56	56	
Zakres częstotliwości - Symulator ucha (Hz)		<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200	<100 - 9200	
Pobór prądu (mA)		1.2	1.2	1.2	1.2	
Power xReceiver (xP)						
Maks. moc wyjściowa (dB SPL)						
	Sprzęgacz 2cm ³	124	124	124	124	
	Symulator ucha	132	132	132	132	
Maks. wzmacnienie (dB)	Sprzęgacz 2cm ³	57	57	57	57	
	Symulator ucha	65	65	65	65	
Zakres częstotliwości - Symulator ucha (Hz)		<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400	<100 - 6400	
Pobór prądu (mA)		1.2	1.2	1.2	1.2	
UltraPower xReceiver (xUP)						
Maks. moc wyjściowa (dB SPL)						
	Sprzęgacz 2cm ³		130	130	130	
	Symulator ucha		136	136	136	
Maks. wzmacnienie (dB)	Sprzęgacz 2cm ³		66	66	66	
	Symulator ucha		72	72	72	
Zakres częstotliwości - Symulator ucha (Hz)			<100 - 5800	<100 - 5800	<100 - 5800	
Pobór prądu (mA)			1.3	1.3	1.3	

Uwaga:
Słuchawka UltraPower xReceiver (xUP) nie jest kompatybilna z Phonak Audeo B-10.

- 1 IP68 oznacza, że aparat nie ulegnie uszkodzeniu do stanu wymagającego naprawy ani po pozostawieniu go na 8 godzin w zakurzonej pomieszczeniu ani po zanurzeniu w wodzie na głębokość 1m przez 60 min. jak to określa norma IEC60529. Brak śladów pyłu wewnątrz obudowy.
- 2 Rzeczywista żywotność akumulatora zależy także od ubytku słuchu, zużycia i warunków słuchowych.
- 3 Rzeczywisty czas ładowania zależy od pozostałej żywotności akumulatora, ale nie przekroczy 3 godzin..

Kolory obudów

W odcieniach włosów i skóry




Tradycyjjne

Połączenie akustyczne

Długość	Dostępne w czterech różnych (0, 1, 2, 3), lewa i prawa	
Nakładka	Otwarta	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)
	Zamknięta	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)
	Typu Power	Dostępna w trzech rozmiarach (S, M, L)
SlimTip*	Twardy materiał	Wybrana
		Pełna
cShell	Twardy materiał	

*Dostępna opcja dla dłuższego kanału

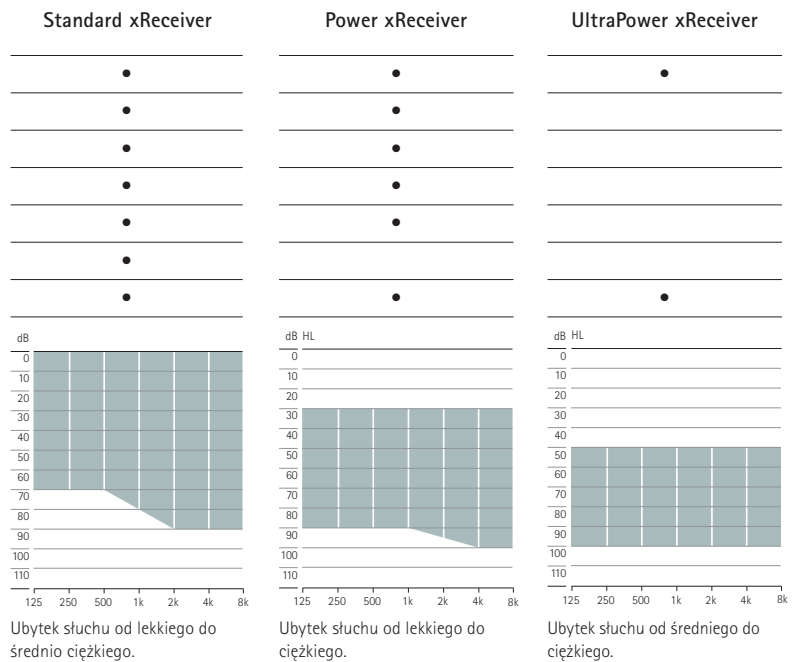

Phonak Audeo B-R - opcje ładowania



Phonak Charger Case RIC

Phonak Charger Case to ładowarka, zestaw do osuszania i etui ochronne w jednym. Dodatkowo zawiera akcesorium do czyszczenia w wytrzymałej i odpornej na zachłapania obudowie przeznaczonej na dwa aparaty Audeo B-R.



Phonak Power Pack

Do ładowania Audeo B-R w podróży. Przystawka Phonak Power Pack może być z łatwością dołączona do spodu etui Phonak Charger Case. Zapewnia zasilanie na 7 pełnych ładowań dwóch aparatów słuchowych Audeo B-R.



Phonak Mini Charger RIC














Phonak Mini Charger to kompaktowa ładowarka dla dwóch aparatów Audeo B-R.

Dopasowanie

Program	Phonak Target 5.0 lub nowszy
Interfejs	iCube II*, NOAHLink, HI-PRO, HI-PRO2

* iCube II jest wymagany do dopasowania wszystkich Audeo B-10 oraz Audeo B-R

Portfolio Urządzeń do Komunikacji Bezprzewodowej

Bezprzewo	Audéo B-10 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312 B90/B70/B50/B30	Audéo B-312T B90/B70/B50/B30	Audéo B-13 B90/B70/B50/B30	Audéo B-R B90/B70/B50
 Phonak CROS B-312	•	•	•	•	
 Phonak CROS B-13	•	•	•	•	
 Phonak DECT II	•	•	•	•	•
 Phonak PilotOne II	•	•	•	•	•
 EasyCall II	•	•	•	•	•
 Phonak ComPilot II	•	•	•	•	•
 Phonak ComPilot Air II	•	•	•	•	•
 Phonak TVLink II	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
 Phonak RemoteMic	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹	• ¹
Roger					
 Roger 18				•	
 Roger X / AS18				•	
 Roger X / Phonak ComPilot II	•	•	•	•	•
 Roger MyLink			•	•	

Więcej informacji o mikrofonach Roger można znaleźć www.phonakpro.pl/roger

¹ Wymagany Phonak ComPilot II lub ComPilot Air II